

Благодарим Вас за использование Электрической Зубной Щетки Oclean Air2T Sonic.

Важные Советы по Безопасности

Во время работы зубная щетка вибрирует на высоких скоростях, поэтому при первом использовании возможно ощущение дискомфорта. Это ощущение начнет постепенно уходить через 7–14 дней.

Если зубная щетка не используется в течение длительного времени, батарея все равно будет разряжаться из-за потребления энергии в режиме ожидания. Щетку нужно периодически подзаряжать. Имейте в виду, что индикатор зарядки на щетке загорится не сразу. Подождите 6–10 минут, чтобы зубная щетка вернулась в нормальное состояние.

Во время зарядки зубная щетка может слегка нагреваться. Это нормальное явление. Если во время зарядки зубная щетка сильно нагревается, незамедлительно прекратите заряжать и/или выключите ее и отправьте в авторизованный центр обслуживания клиентов Oclean для проверки.

Зубную щетку можно использовать только со специальными насадками Oclean. Компания Oclean не несет ответственности за последствия, возникшие в результате использования зубной щетки с насадками других производителей.

Зубная щетка предназначена только для чистки полости рта. Не используйте ее в других целях.

Зубная щетка - это предмет личной гигиены, поэтому ей должен пользоваться только один человек.

Хранить зубную щетку следует в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Предупреждение для лиц с повышенной чувствительностью полости рта:

Следующим 3 типам людей рекомендуется использовать данную зубную щетку только после консультации со стоматологом.

Лица, перенесшие операцию на деснах, полости рта или проходящие лечение после этой операции.

Лица с плохо зафиксированными зубными протезами, постоянно кровоточащими деснами или любыми другими подобными проблемами полости рта.

Лица с чувствительной ротовой полостью.

Лица с ограниченными умственными и физическими возможностями, лица, не имеющие соответствующего опыта, и дети в возрасте до 12 лет должны использовать эту зубную щетку только под присмотром опекунов.

Примечания:

Питание следует отключать перед очисткой щетки и когда база для зарядки аккумулятора не используется

Регулярно очищайте вилку кабеля питания, чтобы не допустить скопление пыли и грязи, которые могут снизить эффект зарядки.

Введение

Питание Вкл.

Включите зубную щетку. Для этого нажмите и недолго удерживайте кнопку питания. По завершению 2-минутной чистки зубная щетка выключится автоматически.



Чтобы насадка щетки могла нормально функционировать, между головкой и основным корпусом необходимо оставить небольшой зазор примерно 0,5 мм.

Кнопка Вкл./Выкл.
Короткое Нажатие: Питание Вкл./Выкл. Нажмите и Удерживайте: Переключайте интенсивность чистки между режимами плавного начала с последующей чисткой.

Индикатор Питания
Статус зарядки: Мигает белый свет Аккумулятор Заряжен Полностью; Белый свет горит непрерывно Низкий Заряд Аккумулятора; Красный свет быстро мигает

Кольцевой Интерфейс Зарядки
Благодаря магнитной зарядке зубная щетка притягивается и заряжается, когда она находится рядом с зарядным устройством.
Примечание: Питание следует отключать, когда аккумулятор полностью заряжен.

Переключатель Интенсивности

В Oclean Air2T установлено 2 программы чистки по 2 минуты: Режим Плавного Начала (по умолчанию) с Последующей Чисткой.
Чтобы переключить интенсивность, нажмите кнопку питания на работающей зубной щетке и удерживайте в течение 2 секунды.

Индикация Уровня Заряда Аккумулятора

Зарядите зубную щетку, если индикатор состояния мигает красным.

Инструкции по Эксплуатации



Вставьте насадку в корпус зубной щетки до упора. Чтобы насадка щетки могла нормально функционировать, между головкой и основным корпусом необходимо оставить небольшой зазор примерно 0,5мм.



Нанесите на зубную щетку небольшое количество зубной пасты и смочите ее водой. Включать зубную щетку следует непосредственно в полости рта, чтобы предотвратить разбрызгивание зубной пасты.



Расположите зубную щетку таким образом, что щетина находилась под углом 45° от линии десен. Перемещайте зубную щетку медленно.



Держите зубную щетку за ручку и медленно перемещайте ее круговыми движениями. Не давите на зубы слишком сильно.




По завершению чистки прополощите рот чистой водой.


Рекомендуемый Способ Чистки Зубов

Время Чистки

Стоматологи рекомендуют чистить зубы в течение 2-3 минут.

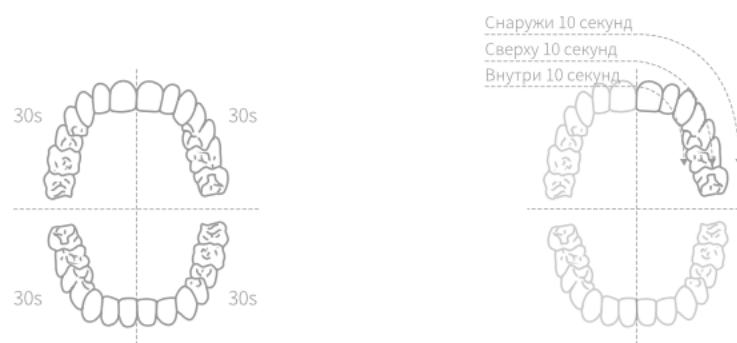

Рекомендуемые Чистящие Движения для Разных Типов Зубов

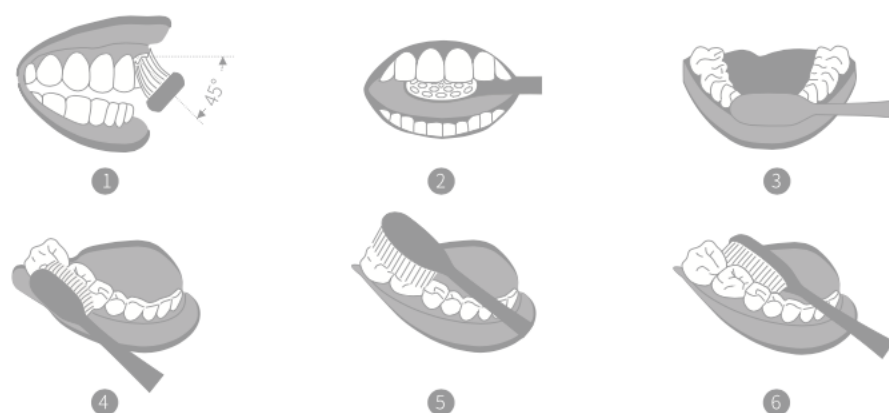

Процесс Зарядки

0%-95% - индикатор питания мигает.

95%-100% - индикатор питания горит непрерывно.

Первое Использование

Время зарядки зависит от степени разряженности аккумулятора.

Рабочий процесс

При снижении заряда аккумулятора до 5%, начинает мигать красный индикатор. Щетку необходимо зарядить.

Примечания:

Пользователи не могут самостоятельно заменить батарею сами. Это должны делать только сотрудники Авторизованного Центра по Работе с Клиентами Oclean. Посторонним лицам запрещается разбирать данное изделие. Посторонние лица не могут заменять кабель USB. В случае повреждения обратитесь в Центр Послепродажного обслуживания клиентов Oclean.


Для зарядки подходит зарядное устройство мобильного телефона с разъемом USB на 5В/1А или 5В/2А.

Например, Зарядное Устройство для iPhone, Зарядное Устройство для Планшета и др.

Если ток заряда меньше 1 А, щетка будет заряжаться дольше.


Напряжение зарядного устройства выше 5В может привести к повреждению цепи зарядки.

Очистка и Уход

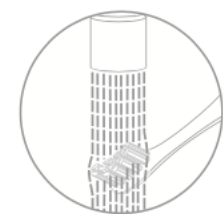


Очистка Насадки Щетки

После каждого использования очищайте насадку щетки и высушивайте ее на воздухе. Не дергайте за щетину. Это может привести к деформации насадки.

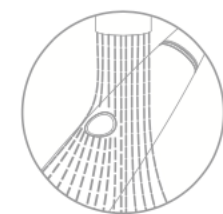

Очистка Корпуса

Обмойте ручку щетки чистой водой, затем протрите мягкой тканью и просушите на воздухе. Не нажимайте на резиновое уплотнительное кольцо острыми или металлическими предметами, т.к. его можно легко повредить.

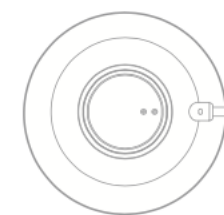

Очистка Зарядного Устройства

Протрите загрязненные части зарядного устройства мягкой тканью. Перед чисткой зарядного устройства выньте вилку зарядного устройства из розетки.



Замена Насадки

Для поддержания оптимальной чистки зубов стоматологи рекомендуют менять насадку каждые 2-3 месяца.

• Характеристики

Наименование Товара	Электрическая Зубная Щетка Oclean Air2T Sonic
Наименование Модели	Oclean Air2
Входная Мощность	2,5Вт
Зарядка	Зарядное Устройство Oclean с USB-разъемом
Входное напряжение	5V=0,5A
Стандартные Параметры для Зарядки	5В /1А постоянного тока или больше
Срок Службы Батареи	30 Дней (*)
Емкость Аккумулятора	800 мАч (**)
Длительность Зарядки	2,5 Часа (***)
Стандарт	GB 39669-2020

* Подтверждено при ежедневной чистке два раза в день по 2 минуты в режиме низкой интенсивности.

** Емкость аккумулятора теоретически имеет допуск по емкости 50мАч

*** Рекомендуется использовать зарядное устройство с USB-разъемом на 5В/0,5А