

Важные инструкции по безопасности

Рекомендуется использовать этот продукт только для лиц старше 12 лет.
Продукт может использоваться только с заменяемыми насадками Oclean. Мы не несем ответственности за последствия, связанные с использованием насадок сторонних производителей без сертификации.
Этот продукт предназначен только для личной гигиены полости рта и не рекомендуется для медицинских целей.
Этот продукт предназначен только для использования внутри помещения. Не ставьте зубную щетку на прямое солнечное светлое место на продолжительное время. Рекомендуется помещать ее в сухих хорошо проветриваемых помещениях с нормальной температурой.
Перед зарядкой, пожалуйста, высушите корпус мягкой тканью и регулярно очищайте базу зарядки сухой тканью, чтобы предотвратить загрязнение.

Изменение насадки зубной щетки:

При замене насадки зубной щетки, тяните ее или вставляйте вертикально, не поворачивая ее влево или вправо.
Стоматологи рекомендуют менять насадку зубной щетки каждые два-три месяца.


Внимание следует уделять людям со следующими проблемами чувствительности полости рта:

- Тем, кто недавно прошел операцию на деснах или находится на лечении.
- Людям с другими симптомами во рту, включая тех, у кого нестабильные протезы или есть постоянное сильное кровотечение из десен.
- Люди с чувствительными и хрупкими проблемами полости рта.

Этот продукт не рекомендуется для использования данной группой или перед использованием следует проконсультироваться с профессиональным стоматологом.

Этот продукт не подходит для людей с ограниченными возможностями, психическими нарушениями или отсутствием соответствующего опыта и знаний [включая детей (0-12 лет)]. Если используется без надзора опекунов, то только под их контролем.

Сенсорный экран
Поддерживает вертикальное и горизонтальное перемещение, пожалуйста, проведите по левой и правой сторонам экрана.

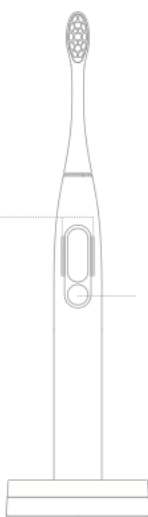

Google Play Store & iOS APP Store

Кнопка: Когда щетка включена, нажатие на кнопку заставит щетку начать чистить. Если кнопка нажата, когда зубная щетка работает, чистка приостановится, нажмите кнопку снова в течение 30 секунд, чтобы продолжить чистку. На главном интерфейсе удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы заблокировать или разблокировать экран; удерживайте кнопку питания в течение 8 секунд, чтобы вернуть его в режим завода.

Руководство пользователя

Первое использование:

Чтобы включить зубную щетку, нажмите кнопку питания. После включения зубная щетка перейдет в режим ожидания, а Bluetooth и WiFi останутся включенными, пока экран горит. После выключения экрана Bluetooth и WiFi автоматически отключатся через 30 секунд бездействия.

Установка приложения:

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение «Oclean Care +», затем найдите и подключитесь к зубной щетке внутри приложения.
Примечание: подключение к зубной щетке через "настройки Bluetooth" в настройках системы вашего телефона не будет работать.

Подключение приложения:

На странице "Устройства" приложения нажмите на верхнее изображение устройства, чтобы перейти на страницу "Информация об устройстве", затем включите "Автоматический переключатель между режимами утро/вечер" в разделе "Настройки функций", чтобы позволить зубной щетке автоматически переключаться между режимами "Утренний успокаивающий" и "Вечерний очищающий".

Настройки плана чистки зубов:

После успешного привязывания зубной щетки к приложению заполните информацию о своих зубах, чтобы получить рекомендуемые планы чистки, которые лучше всего подходят для вас. В качестве альтернативы можно настроить свой собственный эксклюзивный план чистки, нажав "Эксклюзивный режим" на странице "Устройства" приложения.

Просмотр записей чистки зубов в приложении:

Приложение может получать данные о зубной щетке только во время чистки, если зубная щетка подключена к WiFi и привязана к приложению. Данные о зубной щетке, продолжительностью менее 15 секунд, не будут сохранены. Зубная щетка может хранить ограниченное количество данных о чистке зубов (до 7 дней), поэтому, пожалуйста, подключите зубную щетку к WiFi и синхронизируйте данные с приложением в течение 7 дней.

План чистки зубов:

Без установки каких-либо настроек, зубная щетка будет работать в режиме «Неограниченная очистка» по умолчанию, где будет сигнал остановка после работы зубной щетки в течение 2 минут, и она автоматически остановится через 5 минут работы.

Зарядка зубной щетки:

Перед зарядкой высушите нижнюю часть зубной щетки, затем вставьте кабель USB в зарядную базу в адаптер. После этого вы можете определить уровень заряда батареи с помощью процента заряда, отображаемого на экране электрической зубной щетки Oclean. После полной зарядки, пожалуйста, своевременно удалите зубную щетку с зарядной базы. После чистки, пожалуйста, зарядите ее, когда зубная щетка предупредит вас о низком заряде батареи.

Автоматическое пробуждение:

По умолчанию поднятие зубной щетки автоматически активирует экран.
Если экран автоматически активируется несколько раз подряд без чистки зубов, следующее использование потребует нажатия кнопки для его активации.
При низком заряде батареи поднятие зубной щетки не пробудит экран автоматически.

Программа научных рекомендаций

Brush Activity Clover: Brush Activity Clover внедряет управление здоровьем полости рта в ежедневном закрытом цикле. Записывается количество раз, когда чистят зубы в день (взрослым рекомендуется чистить зубы как минимум дважды в день), время чистки зубов (чистить зубы более 2 минут каждый раз) и оценка чистки зубов (средний балл более 90 очков каждый раз). Brush Activity Clover является указателем ухода за полостью рта каждый день.


Напоминание о чрезмерном давлении: при чистке зубов, если применяется слишком большое давление, это может повредить десны или поверхность зуба. Поэтому, когда зубная щетка обнаруживает слишком большое давление, она будет издавать звуковое напоминание, а нижний свет также будет гореть красным. (Эта функция включена по умолчанию)

Напоминание о чрезмерной боковой тяге: при чистке зубов чрезмерная боковая тяга легко может вызвать кровотечение десен или повреждение шеи зуба. Поэтому, когда зубная щетка обнаруживает чрезмерную боковую тягу или слишком быстрое чистку, она будет издавать звуковое напоминание. (Эта функция включена по умолчанию)


Наклон головки щетки под углом 45°: выравнивая головку щетки под углом 45° к десневому желобу, зубной налет, прикрепленный к десневому желобу, может быть лучше очищен, сохраняя здоровье десен. Зубная щетка будет издавать звуковое напоминание о наклоне головки щетки под углом 45° при начале чистки. (Эта функция должна быть включена в приложении)

Напоминание о чистке поверхностей прикуса: поверхности прикуса моляров склонны к кариесу, поэтому необходимо уделить особое внимание чистке зубов в этой области. Во время процесса чистки зубов зубная щетка будет издавать звуковое напоминание для чистки поверхностей прикуса. (Эта функция должна быть включена в приложении)

Напоминание об изменении зон чистки: для эффективного предотвращения проблем с зубами, все зоны должны быть тщательно вычищены во время чистки. Поэтому после чистки одной зоны будет звуковое напоминание об изменении зон во время процесса чистки. (Эта функция должна быть включена в приложении)

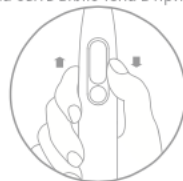

Перелистните экран вверх и вниз.

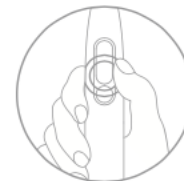

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы подтвердить настройки.

Предупреждение о низком заряде батареи

Когда процент заряда батареи опускается ниже 10%, предупреждение будет появляться время от времени на дисплее вашей зубной щетки, указывая на то, что заряд батареи заканчивается, и его нужно скоро зарядить. Когда заряд батареи очень низкий, зубная щетка выключится, а мотор зубной щетки начнет вибрировать, чтобы предупредить вас о необходимости зарядки батареи.

Поставьте нижнюю часть зубной щетки на зарядное устройство, чтобы убедиться, что зубная щетка направлена вертикально и зафиксирована в зарядном устройстве. В процессе нормальной зарядки зубная щетка покажет знак зарядки и процент заряда батареи и будет полностью заряжена примерно за 5,5 часа.

Важное предупреждение о зарядке

Поскольку электрическая зубная щетка оснащена быстрым механизмом зарядки, рекомендуется подключать и заряжать зубную щетку только при необходимости. Не ставьте зубную щетку на зарядку, когда ее зарядка не требуется или она уже полностью заряжена, так как долгое время заряжать полностью заряженную зубную щетку может привести к преждевременному разряду встроенной батареи, что повлияет на опыт использования.

Рекомендуемый метод чистки зубов



Поместите зубную щетку медленно под углом 45° между щетинками и линией десны. Во время этого процесса не нужно двигать щеткой вверх или вниз.



Держите ручку зубной щетки легко, двигайте ее медленно круговыми движениями, и не нажимайте слишком сильно.



Пожалуйста, полощите рот чистой водой после чистки.

● Характеристики

Название продукта	Электрическая зубная щетка Oclean WiFi Smart Sonic
Модель	V8100
Степень защиты IP	IPX7
Зарядное устройство	Зарядное устройство WP02 Wireless Charging Base
Входное напряжение	5 В ~ 1 А
Время работы от батареи*	40 дней
Емкость батареи	1200 мАч
Время зарядки	Примерно 4,5 часов
Стандарт Bluetooth	GB39669-2020
Частотный диапазон	BLE 5.0 WiFi: 2412MHz-2472MHz BT: 2402MHz-2480MHz

* Используется режим по умолчанию, время работы рассчитывается при условии работы 2 раза в день по 2 минуты каждый раз.



- НЕ разбирайте, не бейте, не сжимайте и не бросайте устройство в огонь.
- НЕ используйте зубную щетку, если ее батарея выпучилась или расширилась.
- НЕ помещайте устройство в окружение с высокой температурой.
- НЕ используйте устройство, если его батарея была подвергнута погружению в воду.