

Спасибо что выбрали электрическую зубную щетку Oclean Smart Sonic.

Перед вами «умная» ультразвуковая зубная щетка. Внимательно прочтите данное руководство пользователя. Оно доступно в соответствующем приложении. Ниже представлены дополнительные сведения по использованию этого изделия для чистки зубов.

С осторожностью должны использовать изделие лица с проблемами ротовой полости, в частности

пользователи, которые недавно перенесли хирургическое вмешательство на пародонте или в данный момент проходят лечение.

Лица с другими симптомами в ротовой полости, в том числе пользователи с неустойчивыми протезами или сильной хронической кровоточивостью десен.

Другие лица с проблемами, связанными со здоровьем ротовой полости.

Это изделие не рекомендуется использовать указанным выше категориям лиц. Перед применением проконсультируйтесь с профессиональным стоматологом.

Данное изделие не предназначено для людей с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами или тех, кто не имеет достаточного опыта и знаний (в том числе детей возрастом до 12 лет). Кроме ситуаций, когда изделие используется под присмотром опекуна или иного законного представителя.

Памятка по безопасности

Данное изделие рекомендуется использовать с 12 лет.

Изделие можно использовать только со сменными насадками Oclean. Компания Oclean не несет ответственности за последствия использования несертифицированных насадок других производителей.

Данное изделие является средством личной гигиены и не рекомендуется использовать в медицинских целях или несколькими людьми.

Оно предназначено только для использования внутри помещений. Не оставляйте зубную щетку под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени. Рекомендуем хранить ее в сухом, хорошо проветриваемом месте при комнатной температуре.

Прежде чем заряжать, насухо протрите корпус изделия. Регулярно очищайте зарядное устройство сухой тряпкой, не допуская образования пятен.

Насадка

При выполнении замены следует вынуть и установить насадку вертикально, не проворачивая ее влево или вправо

Стоматологи рекомендуют менять насадку щетки каждые два-три месяца."

"Кнопка включения/выключения

При включенной зубной щетке короткое нажатие кнопки приостанавливает работу щетки, при повторном коротком нажатии в течение 15 секунд щетка продолжит работу. Если зубная щетка не используется более 15 секунд, экран гаснет, и устройство переходит в спящий режим

Первое использование. Коснитесь кнопки включения/выключения, чтобы включить зубную щетку и активировать модуль Bluetooth. После этого зубная щетка перейдет в режим ожидания, а Bluetooth продолжит работать в постоянном режиме.

Программа чистки зубов. Без предварительной настройки зубная щетка работает в течение 2 минут, по умолчанию выполняя стандартную программу ежедневной чистки, т. е. изделие будет оповещать пользователя о необходимости изменения зоны чистки, изменяя характер вибрации каждые 30 секунд, и автоматически прекратит работу через 2 минуты.

Установка приложения. После сканирования QR-кода для загрузки приложения Oclean выполните поиск и подключите зубную щетку в приложении. Примечание. Попытка подключения зубной щетки через «Системные настройки – Настройки Bluetooth» в телефоне не будет работать.

Инструкция по применению

Первое включение изделия

При первом использовании зубной щетки слегка нажмите кнопку On (Вкл.), зубная щетка включится, при этом модуль Bluetooth будет также функционировать в постоянном режиме. Можно скачать и установить приложение Oclean, а затем подключить и настроить зубную щетку в нем.

Установка приложения и настройка зубной щетки

Отсканируйте QR-код, чтобы завершить установку приложения, в котором можно настроить различные функции зубной щетки, например: включение/выключение оповещения об изменении зоны чистки спустя 30 секунд, функция защиты зубов с автоматическим снижением частоты (Automatic Frequency Reduction Tooth Guard) и др. Кроме того, можно индивидуально настроить программу чистки зубов и ввести ее непосредственно в зубную щетку.


Зарядка

Зарядка зубной щетки. Прежде чем заряжать, насухо вытрите корпус, а затем вставьте щетку в беспроводную зарядную станцию. Состояние зарядки можно определить с помощью индикатора на беспроводной станции, а уровень заряда аккумулятора в процентах отображается на дисплее электрической зубной щетки Oclean. Не оставляйте зубную щетку на беспроводной зарядной станции дольше необходимого времени. Когда зубная щетка полностью зарядится, снимите ее с беспроводной зарядной станции. Заряжайте щетку, когда она сигнализирует о низком заряде аккумулятора.

Важная информация о зарядке


В данном изделии используется механизм беспроводной зарядки, поэтому рекомендуется, чтобы оно находилось в зарядном устройстве, только если это необходимо. Не забывайте вынимать зубную щетку из зарядной станции по окончании зарядки. Если надолго оставлять зубную щетку во включенной беспроводной зарядной станции, это может привести к преждевременному снижению ресурса встроенного аккумулятора и, как следствие, качества работы прибора.

Примечание

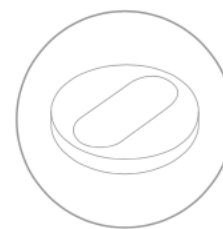


Монтаж нижней части настенного крепления

При использовании настенного крепления зубную щетку следует вставлять насадкой вверх.

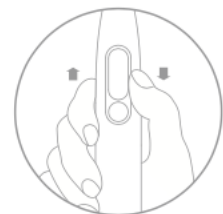

Проведите пальцем вверх и вниз Для подтверждения настроек нажмите кнопку включения/выключения

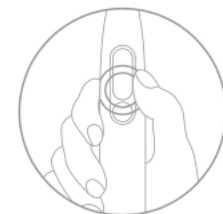

Рекомендуемый способ чистки зубов



Медленно перемещайте зубную щетку, сохраняя угол 45° к линии десны. При выполнении этой процедуры нет необходимости вручную водить щеткой вверх-вниз.



Аккуратно держите рукоятку зубной щетки, медленно водите ею круговыми движениями без чрезмерного нажима.



После чистки прополощите рот чистой водой.

• Характеристики изделия

Наименование изделия	Электрическая зубная щетка Oclean Smart Sonic
Модель	Y2087
Версия	Pro Elite
Степень защиты	IPX7
Мощность	1,5 Вт
Зарядка	Беспроводная зарядная станция Oclean WP01
Входное напряжение	5 В \approx 0,3 А
Продолжительность работы*	35 дней в стандартном режиме по 2 мин. на процедуру, 2 процедуры в день.
Емкость аккумулятора	800 мАч
Время зарядки	3,5 ч
Bluetooth	Bluetooth 5.0 и последующие версии

* Использование стандартного режима из расчета 2 минуты/раз, 2 раза/день в рабочем состоянии.



1. ЗАПРЕЩЕНО разбирать, ударять, сдавливать или бросать устройство в огонь.
2. НЕ используйте зубную щетку, если ее аккумулятор вздулся или увеличился в объеме.
3. НЕ подвергайте аккумулятор воздействию высокой температуры.
4. НЕ используйте аккумулятор, если он подвергся воздействию влаги.
5. НЕ кладите на зарядную станцию металлические предметы, кроме самой зубной щетки.
6. Прежде чем выбросить зубную щетку, из нее необходимо вынуть аккумулятор.
7. Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите устройство.
8. Аккумулятор подлежит утилизации безопасным способом.