


Схема устройства

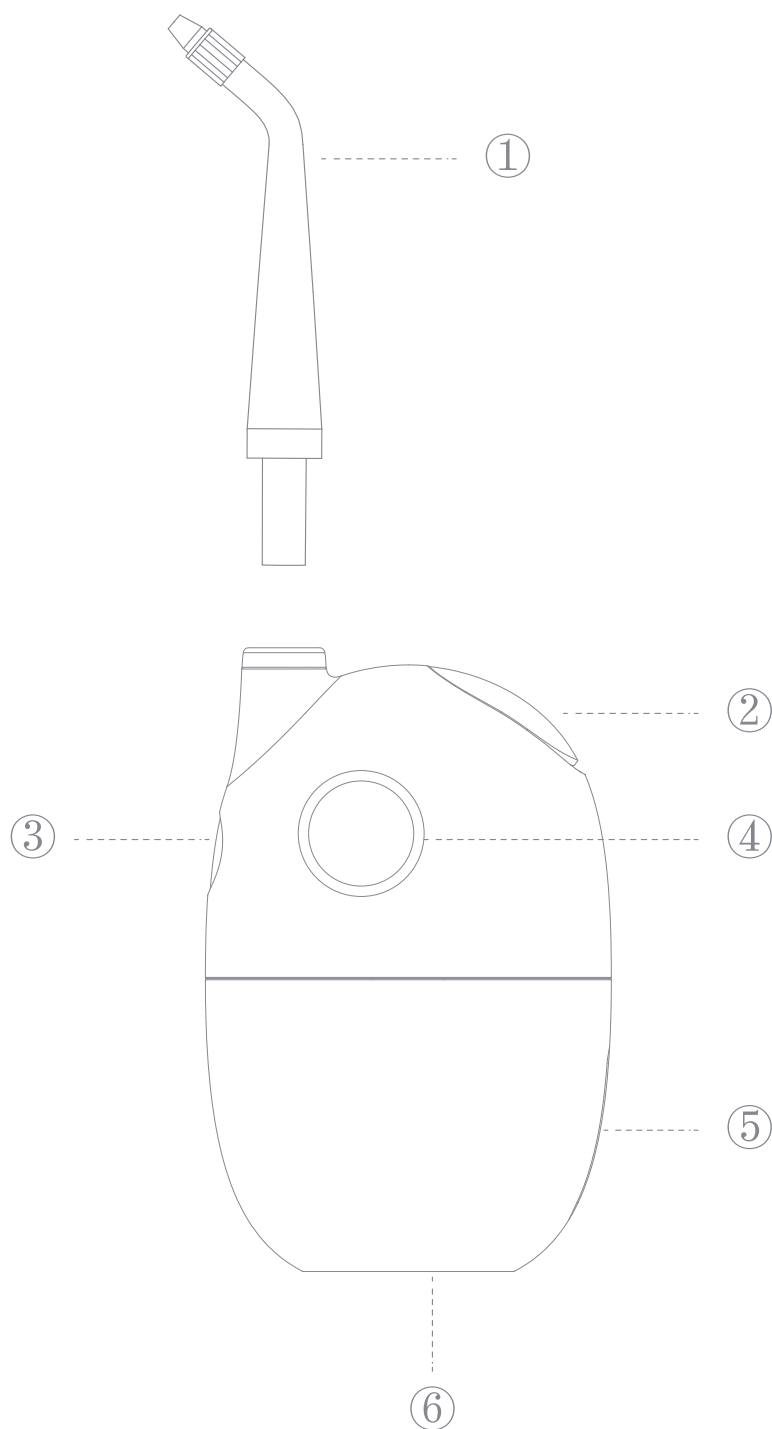

Все элементы на схеме снабжены подробными пояснениями

IPX7

CE



EAC

FC



UK
CA

R-R-yIT-W7602

Благодарим вас за использование ирригатора полости рта Oclean.

● Важные меры предосторожности

1. Этот продукт можно использовать только с насадками Oclean. Oclean не несет ответственности за любой ущерб или убытки, вызванные использованием аксессуаров сторонних производителей.
 2. Не используйте этот продукт без предварительной установки насадки.
 3. Этот прибор могут использовать дети в возрасте 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний при условии, что они находятся под присмотром или проинструктированы по безопасному использованию прибора и понимают опасности. вовлеченный. Детям не разрешается играть с этим прибором. Детям не разрешается выполнять чистку и техническое обслуживание без присмотра.
 4. Пациенты, которые только что перенесли операцию на полости рта, должны проконсультироваться со своим стоматологом перед использованием этого продукта.
 5. Если ваши десны продолжают кровоточить после использования этого продукта в течение более 2 недель, обратитесь к стоматологу.
 6. Не подносите кончик насадки близко к деснам или зубам, чтобы избежать травм.
 7. Не используйте его для целей, отличных от чистки полости рта, иначе это может привести к случайной травме при попадании воды в глаза, нос, уши или горло.
 8. Не используйте в изделии йод, соленую воду или концентрированные эфирные масла, нерастворимые в воде. Использование этих жидкостей снизит производительность продукта и сократит срок его службы; не вводите в этот продукт высококонцентрированную жидкость для полоскания рта. Если вам нужно использовать жидкость для полоскания рта, разбавьте ее пропорционально перед инъекцией. После использования разбавленной жидкости для полоскания рта вам необходимо снова использовать чистую воду. Промывка для очистки внутренней трубки.
 9. Не погружайте корпус стиральной машины в воду. После использования протирайте корпус сухой тканью.
 10. Если этот продукт не будет использоваться в течение длительного времени, резервуар для воды следует опорожнить и высушить, насадку, корпус и порт зарядки следует очистить и хранить в прохладном и сухом месте.
 11. Не разбирайте этот продукт и не заменяйте его части, чтобы избежать повреждения или опасности.
 12. В первые несколько раз использования новая машина может иметь легкий запах пластика. Это нормально, и запах исчезнет после некоторого использования.
 13. Не подвергайте устройство или аккумулятор воздействию высоких температур. Нормальный диапазон температур для зарядки аккумулятора составляет 0–45 градусов.
 14. Обратите внимание, что клеммы оборудования с батарейным питанием или батареи не должны соприкасаться с металлическими предметами во избежание риска короткого замыкания.
- Если приобретенный вами продукт имеет неисправность или дефект, обратитесь в нашу горячую линию сервисного обслуживания: service@oclean.com

● Подробное описание деталей машины

- ① Насадка (насадку можно хранить в резервуаре для воды).
- ② Крышка радиатора: Откройте крышку заливного отверстия для воды и наполните ее водой.
- ③ Кнопка переключения/режима (нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы переключить передачу): Стандартный режим: ежедневная уборка, подходит для большинства людей, испытывающих проблемы с питанием. Деликатный режим: мягкий массаж десен, подходит для людей с чувствительными зубами. Режим массажа: подходит для людей с чрезвычайно чувствительной полостью рта.
- ④ Кольцевой свет: В стандартном режиме кольцевой индикатор горит оранжевым светом. В мягком режиме кольцевой индикатор всегда горит синим цветом. В режиме массажа кольцевой индикатор всегда горит зеленым. Когда машина заряжается, кольцевой индикатор светится белым, а при полной зарядке белый свет горит всегда. Когда уровень заряда батареи ниже 20%, появится напоминание о дыхании красного света. (Если красный свет устройства загорается нормально, отключите и подключите его снова, сохраняя интерфейс зарядки сухим, чтобы обеспечить нормальную зарядку.)
- ⑤ Прозрачное окошко резервуара для воды сбоку.
- ⑥ Порт зарядки типа C: Откройте нижнюю крышку и подключите зарядный кабель, чтобы начать зарядку.

● Как пользоваться ополаскивателем для зубов

1. Установите насадку.
2. Откройте крышку впрыска воды, введите необходимое количество воды в корпус вертикально, а затем закройте крышку (рекомендуется температура воды ниже 40°C).
3. Направьте насадку на щель между зубами и слегка прикройте рот.
4. Нажмите кнопку переключения, чтобы запустить ополаскиватель для зубов.
5. Медленно перемещайте воду вдоль линии зубов и десен, чтобы вода текла в зоне промывания.
6. Пожалуйста, очистите насадку и резервуар для воды сразу после промывки.

● Характеристики продукта

Наименование товара	Oclean AirPump Water Flosser	Номер продукта	W7602
Номинальная входная мощность	5 В±0.5 А	Емкость батареи	1200 мАч
Номинальная входная мощность	2,5 Вт	Метод зарядки	Тип - C
Емкость резервуара для воды	45 мл	Водонепроницаемый уровень	IPX7